



NMR-C NMR キャリスタ

取扱説明書

組立前

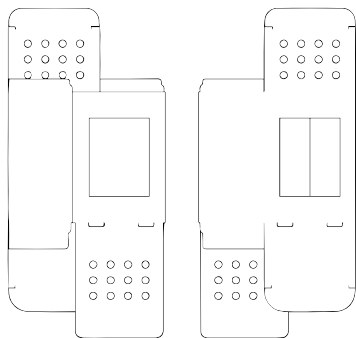

組立後

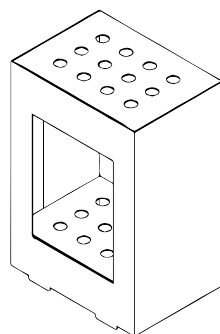

- 取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「使用上の注意」を必ずお読みください。

製品仕様



組立前サイズ	H252mm×W120mm
組立後サイズ	H100mm×W70mm×D50mm
重量	約15g
適応NMRチューブ	H178mm, Φ5

使用上の注意


- 178mm 以外の NMR チューブでのご使用は避け下さい。
- 水平で安定した場所でのご使用をお願い致します。
- 組立は「NMR キャリスタ 組立図」に沿って行って下さい。
- 初期不良があった際は、弊社までご連絡願います。
- 本製品には表面・裏面に PP コーティングを施しておりますが、長時間溶媒に触れていると劣化する恐れがあります。付着した際はウエス等で拭き取り願います。

ご不明な点がある場合は弊社までご連絡ください。


NMR キャリスタ 組立図

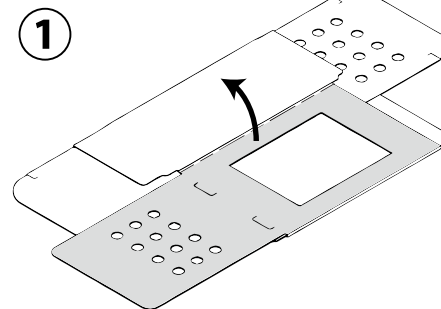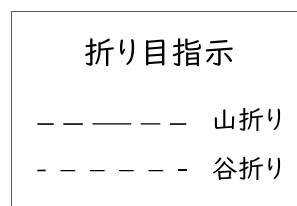


箱状になるよう指示面を立ち上げる。

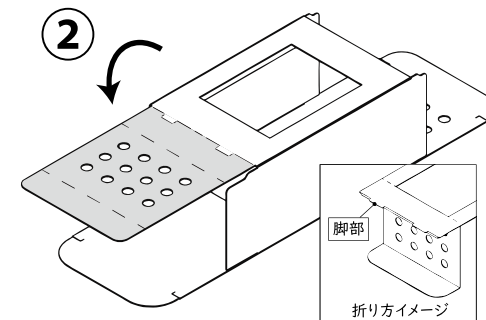


内側に折る。

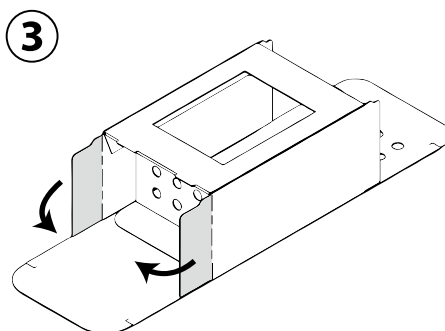


内側に折る。

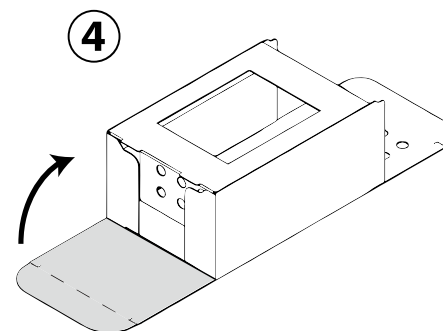


折って差し込む。

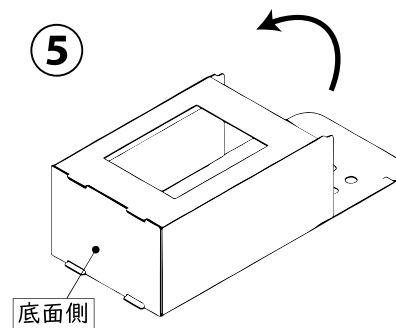


箱の向きを変える。

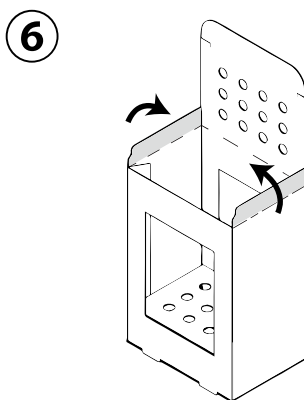

内側に折る。

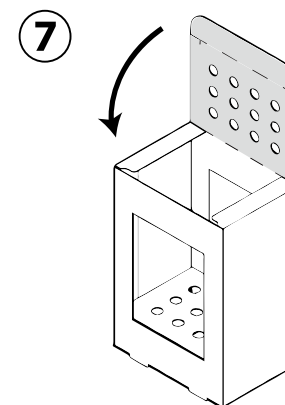

折って差し込む。

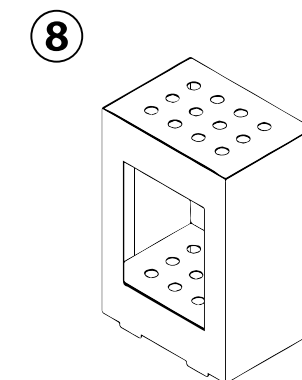

完成。

※ 組み立て前に予め山折り・谷折り部を軽く曲げておくと、組み立てやすくなります。